

Ambu® Perfit ACE® & Mini Perfit ACE®



Die wichtigsten Vorteile

- Flache Bauweise ermöglicht platzsparende Lagerung
- CT, MR und Röntgen kompatibel*
- Einfaches und exaktes Anpassen mittels seitlicher Feinrasterung
- Standard-Grössenmarkierungen bei beiden Zervikalstützen
- Kinnstück mit Trachea- und Drainageöffnung für ein erleichtertes Atemwegsmanagement
- Halterung für Nasensonden und Tubusfixierungen
- Einfache Intubationsmöglichkeit
- Ohne Naturlatex
- Einwegprodukt
- Standardmässig werden beide Zervikalstützen in der kleinsten Grösseneinstellung geliefert

Ambu® Perfit ACE® & Mini Perfit ACE®

28 mögliche Grössen durch 2 Halskrausen

Die Ambu Perfit ACE ist eine einzigartig verstellbare Zervikalstütze. In Verbindung mit der Mini Perfit ACE ermöglichen diese beiden Halskrausen zusammen 28 verschiedene Grösseneinstellungen, um sicherzustellen, dass es für jeden Patienten eine effektive und akkurate Passform gibt.

Die Zervikalstütze ist komplett flach verpackt und hat ein einzigartiges Kinnstück, welches das Atemwegsmanagement erleichtert. Die Ambu Perfit ACE ist eine grössenverstellbare Einweg-Zervikalstütze für Erwachsene zur Immobilisierung der Halswirbelsäule.

Die individuell einstellbare Zervikalstütze umfasst 16 mögliche Grösseneinstellungen und ist somit für jeden erwachsenen Patienten geeignet.

*Verzerrungen oder Schatten können abhängig von den Einstellungen des Bildgebungsgerätes auf den Bildern erscheinen.

Die Ambu Perfit ACE besitzt Verriegelungen, die es dem Ersthelfer ermöglichen, die Zervikalstütze genau an die Anatomie des Patienten anzupassen. Zwei Verriegelungsknöpfe stabilisieren die Zervikalstütze während der Grösseneinstellung an der richtigen Position.

Die Ambu Mini Perfit ACE ist eine individuell einstellbare Zervikalstütze mit 12 möglichen Grösseneinstellungen und ist somit für Kinder und kleine Erwachsene geeignet.

Technische Daten


Ambu Perfit ACE	
Justierbare Grössen	Halslos, Kurz, Normal, Gross
Feineinstellung	16-fache Rasterung
Abmessungen	554 x 215 x 14 mm
Gewicht	200 g
Farbe	Weiss/hellgrau
Ambu Mini Perfit ACE	
Justierbare Grössen	Säuglinge, Kleinkinder, kleine Erwachsene
Feineinstellung	12-fache Rasterung
Abmessungen	447 x 188 x 14 mm
Gewicht	100 g
Farbe	Gelb/hellgrau



Ambu® Perfit ACE®



Ambu® Mini Perfit ACE®

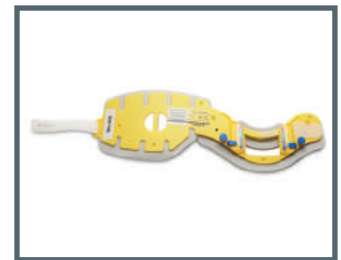

Ambu® Perfit ACE®
Ambu® Mini Perfit ACE®

Material

Produkt	Material
Ambu Perfit ACE	
weiss/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	Polyethylen
Ambu Mini Perfit Ace	
gelb/hellgraues Plastik	Polypropylen
Schaumstoff	Polyethylen

Bestellinformationen

Artikelnummer	Artikelbezeichnung
002 810 001	Ambu Perfit ACE, justierbar von Grösse 3 - 6
000 281 107	Ambu Mini Perfit ACE, justierbar von Grösse 1 - 3